




## RH 112 - Ayuda a la reanimación

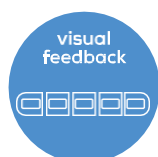

visual  
feedback

Feedback visual mediante LED de colores para cumplimiento de la presión de compresión óptima




acoustic  
signal

Señal acústica para ajustar la óptima frecuencia de compresión de 100 pulsaciones/minuto



easy  
positioning

Fácil colocación gracias a las instrucciones y el marcado directamente en la almohadilla

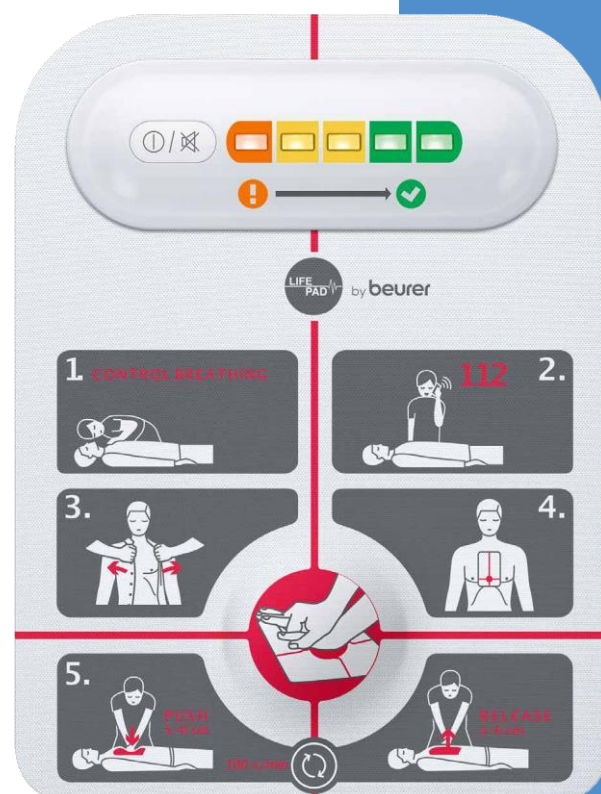

Portátil y fácil de guardar gracias a su tamaño compacto y material flexible

La superficie de apoyo para las manos ayuda a colocarlas correctamente

Se adapta a la forma del cuerpo

Puede utilizarse en combinación con un desfibrilador (El sonido puede desconectarse)

Tecnología patentada\*

Para uso en y por personas mayores de 12 años

A prueba de salpicaduras según IP 44

Producto desechable

Incluye 1x pila CR2032

Producto sanitario

Dimensiones del producto (LxAxA): 210 x 160 x 3 mm

(altura de la carcasa: 15 mm)

Peso del producto: aprox. 130 g


5 años de garantía

PZN: 16792204 (Código Nacional de Medicamento)

Unidad de envío: 3 / Caja de transporte: 4x3

Número EAN: 4211125 65302 6


Número de artículo: 653.02

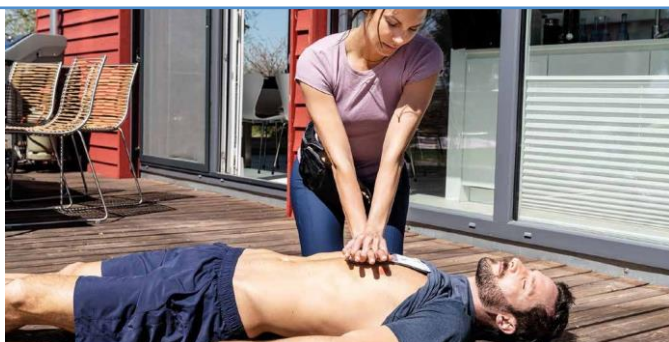

## Primeros auxilios - seguros y rápidos

### LifePad® - Tu ayudante en caso de emergencia

La mayoría de las paradas cardiacas ocurren en casa. En caso de emergencia, muchos socorristas se ven desbordados al principio. El LifePad® le guía durante la reanimación y le ayuda a realizar los pasos correctos de forma segura.

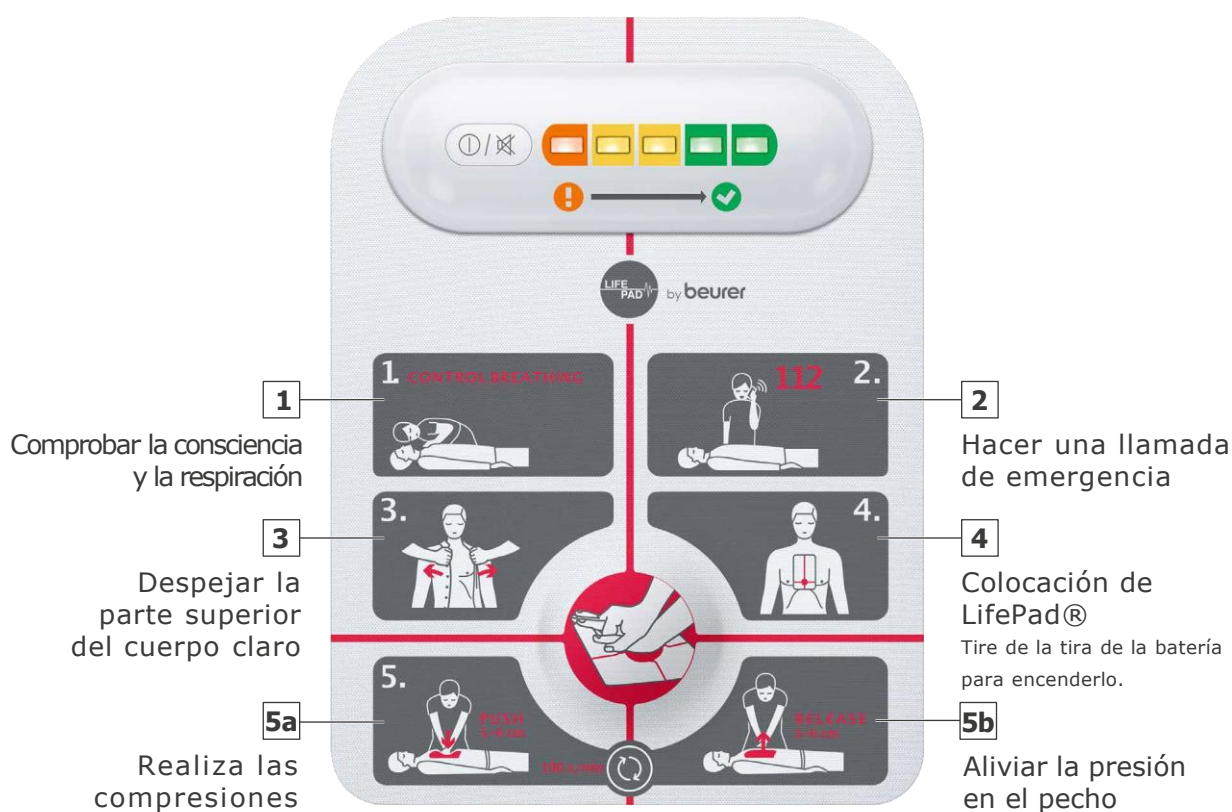

Repita los pasos **5a** y **5b** al ritmo del pitido para asegurar una frecuencia de 100 compresiones por minuto.

El masaje cardíaco se lleva a cabo hasta que se vuelven a percibir signos claros de vida o el médico de urgencias se hace cargo.