

RH 112 - Aiuto alla rianimazione



visual
feedback

Feedback visivo tramite LED colorati per mantenere la pressione di compressione ottimale




acoustic
signal

Segnale acustico per l'impostazione della compressione ottimale e frequenza di compressione di 100 battiti/minuto



easy
positioning

Facilità di posizionamento grazie alle istruzioni e alle marcature riportate direttamente sul cuscinetto

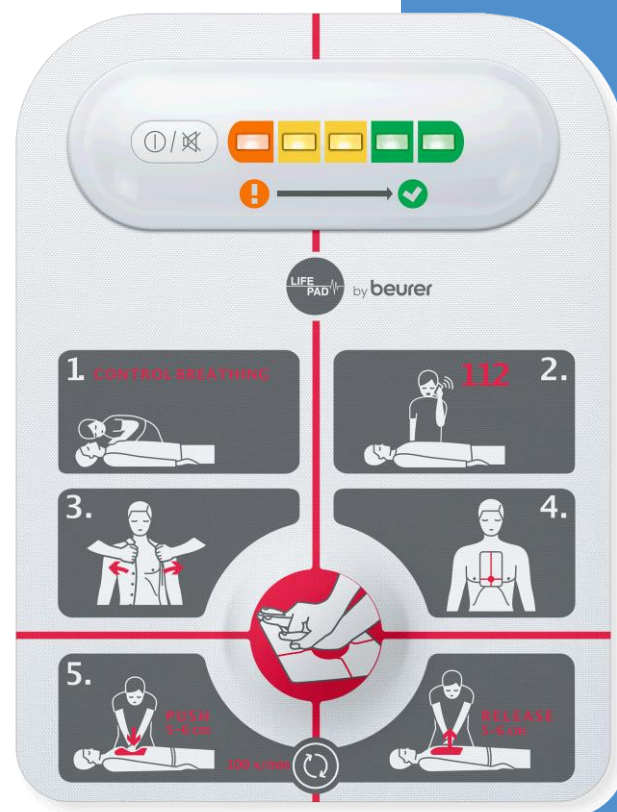

Portatile e facile da riporre grazie alle dimensioni compatte e al materiale flessibile

La superficie di appoggio per le mani aiuta il corretto posizionamento

Si adatta alla forma del corpo

Può essere utilizzato in combinazione con un defibrillatore (il suono può essere disattivato)

Tecnologia brevettata *

Per l'uso su e da parte di persone di età pari o superiore ai 12 anni.

Resistente agli spruzzi d'acqua fino a IP 44

Prodotto monouso

Incl. 1 batteria CR2032

Dispositivo medico

Dimensioni del prodotto (LxLxA): 210 x 160 x 3 mm (altezza dell'alloggiamento: 15 mm)

Peso del prodotto: circa 130 g

Garanzia di 5 anni

PZN: 16792204

PU: 3 / Cartone di trasporto: 4 x 3

N. EAN: 4211125 65302 6

Numero articolo: 653.02

*EP3302395




Primo soccorso: sicuro e veloce

LifePad® - Il vostro aiutante in caso di emergenza

La maggior parte degli arresti cardiaci avviene in casa. Se si verifica un'emergenza, molti soccorritori sono inizialmente sopraffatti.

Il LifePad® vi guida durante la rianimazione e vi aiuta a eseguire le fasi corrette in modo sicuro.

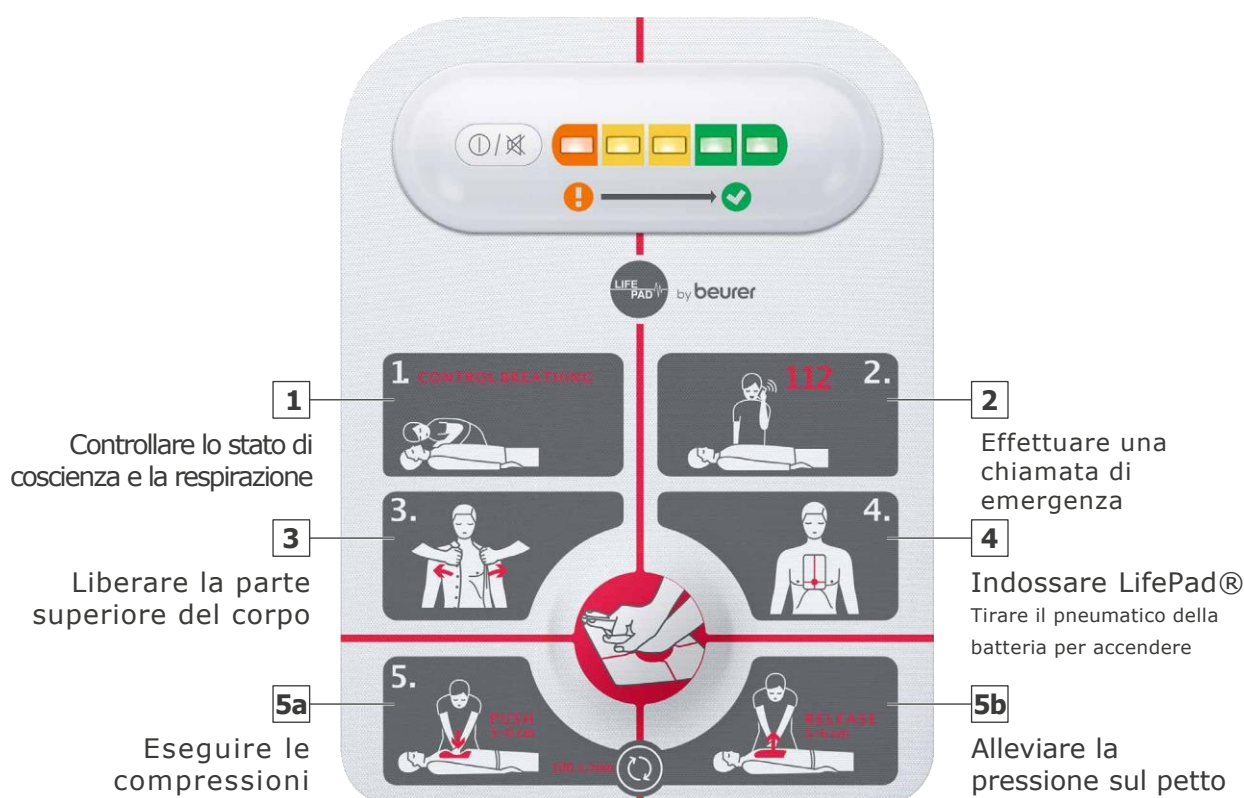

Ripetere i passaggi **5a** e **5b** al ritmo del segnale acustico per garantire una frequenza di 100 compressioni al minuto. Le compressioni toraciche vengono eseguite fino a quando non si notano chiari segni di vita. Segni di vita evidenti o finché non subentra il medico d'urgenza.